


Surtos


Os surtos deveram ser coletados em Bolsas de 300mL com tiosulfato, disponíveis no LACEN-RJ e este deve ser avisado assim que possível sobre a coleta para preparação do corpo técnico e recebimento.

É DE SUMA IMPORTANCIA A ENTREGA DO SINAN E/OU O RELATÓRIO EPIDEMIOLÓGICO

As coletas serão feitas em 5 bolsas de 300mL (total de 1500mL a cada ponto de coleta) e com a mesma numeração e quando cadastradas no GAL deveram ser colocadas como finalidade de **INVESTIGAÇÃO** e motivo de **SURTO**.

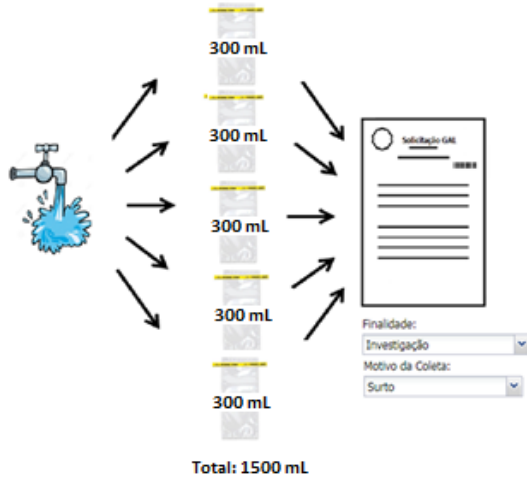

Caso o surto seja relacionado a **Hepatite**, a coleta deverá ser realizada em frascos tipo âmbar de 1000mL em duplicata, sendo assim 2000mL por ponto de coleta.

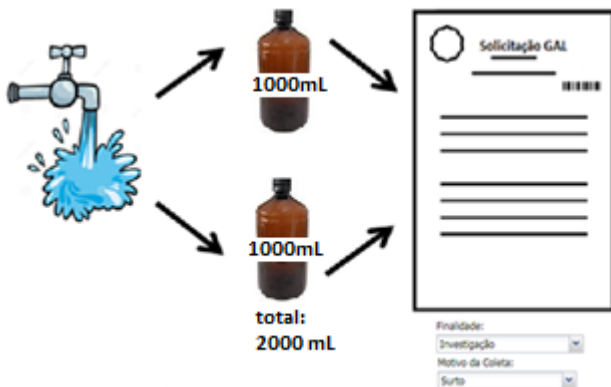

Armazenamento

As caixas devem ser de plástico para fácil higienização e conter Termômetro para aferição da temperatura no transporte.




As caixas sem termômetros podem ser equipadas com tal, contanto que a ponta de medição não fique em contato com o gelox ou com a amostra.



- Não é recomendada a utilização de isopor devido a dificuldade de higienização
- Quando os frascos são de vidro adicionar plástico bolha, jornal, papelão, ou algum material que garanta a integridade da garrafa.

Etiquetas para amostras

É recomendado escrever com caneta para projetor e aguardar 2 min para secagem completa da tinta na etiqueta antes de colar no frasco (recomendamos a marca "pilot" com ponta 1.0)

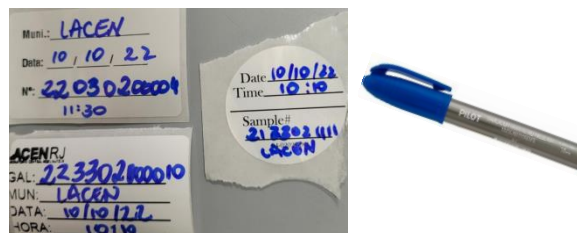

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

ORIENTAÇÕES DE COLETA E TRANSPORTE DE ÁGUAS

Gerência de Controle Sanitário e Ambiental

gcsa@lacen.fs.rj.gov.br

secretaria.gcsa@lacen.fs.rj.gov.br

recpro@lacen.fs.rj.gov.br


(21) 2332-8599

Rua do Resende, 118, Centro - RJ

Orientações de coleta de amostras para Microbiologia



Devem ser cadastradas como "vigiagua mensal" e tem integração com o sistema vigiagua.

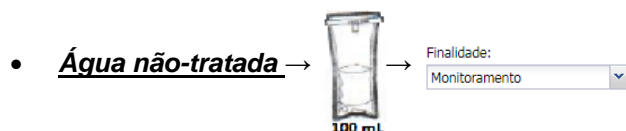


Coletadas em sacos de coleta de 100 mL e devem ser cadastradas como "monitoramento". Não possui integração com o sistema vigiagua.

- As amostras devem ser entregues ao Lacen-RJ com no máximo 22h da coleta devido a se tratar de amostras com microrganismos vivos.
- A temperatura ideal para transporte e entrega da amostra é entre 2°C e 8°C.


Agrotóxicos

As amostras serão coletadas em frascos ambar de 500mL e junto dessas vão o kit de preservação com tiossulfato de sódio e ácido acético já na dosagem certa para adição na amostra. O cadastro no GAL-RJ deve ser como "Vigiagua semestral"

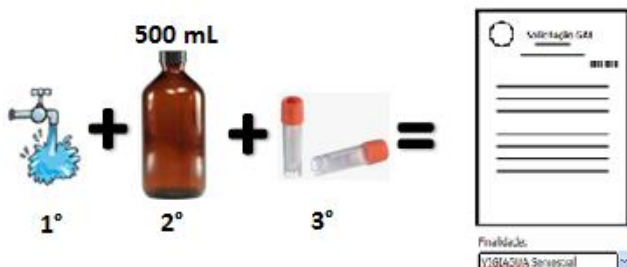

Orientações de coleta de amostras para Físico-Química

As amostras de Físico-química podem ser coletadas no mesmo ponto da coleta da microbiologia respeitando o sistema de abastecimento (SAA) estabelecido no calendário. **MAS ATENÇÃO**, as amostras devem ser coletadas em bolsas adequadas e cadastradas separadas das amostras de microbiologia.

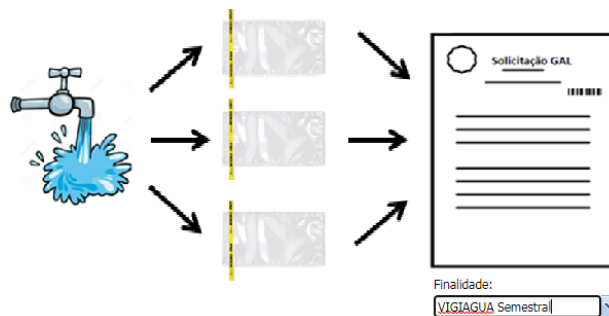

Essas devem estar resfriadas e não podem ter mais de 24 h da coleta no momento da entrega no LACEN-RJ.

Devido ao processo de inclusão dos ensaios Físico-Químicos no sistema GAL, estaremos disponibilizando temporariamente os resultados das análises realizadas em nosso laboratório via e-mail.




Fiocruz

As amostras de Hepatite e Agrotóxicos são analisadas pela Fiocruz-RJ e está tem um prazo para liberação dos ensaios realizados. Assim que repassados estes resultados para o Lacen-Rj este é responsável por informar ao município no qual foi solicitado via email. Por favor, mantenham os e-mails sempre atualizados no LACEN-RJ.



Como ter acesso aos Laudos

Acessar o site: <https://gal.riodejaneiro.sus.gov.br/> e realizar o login.

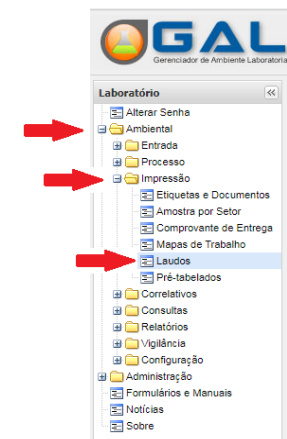

Depois no canto esquerdo acessar Ambiental → Impressão → Laudos.



Na janela que vai abrir procurar o número da solicitação desejada, selecionar, e clicar no botão de impressão.

Caso não tenha acesso ou estiver com algum problema relacionado ao sistema GAL enviar e-mail para o gerente responsável em:

gal.riodejaneiro@gmail.com ou (21) 2334-9985

Calendário de entrega

Caso haja necessidade de troca do dia programado, **NÃO** é necessária de envio de e-mail ou a realização de ligação, contanto que a entrega seja **REALIZADA ENTRE SEGUNDA E QUARTA FEIRA** de 08:00h à 17:00h.

